

AL680/AL690

Cleansui

安心と健康をビルトインした、アルカリクリンスイのキッチン。



AL680

本体セット(カートリッジUZC2000付)
138,000円(税込み144,900円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 15,500円(税込み16,275円)

AL690

本体セット(カートリッジUNC1000付)
141,000円(税込み148,050円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 18,500円(税込み19,425円)

除去物質数

13

BUILT-IN TYPE



専用水栓



網篋カバー



上面施工



アンダーシンク

U

アルカリイオン水

飲用に、慢性下痢、消化不良、胃酸過多、
胃腸内異常発酵、制酸に有効。

酸性イオン水

弱酸性のアストリンゼント(化粧水)として
美容に。

浄水 / ミネラルを含んだ水

鉛やトリハロメタンなど13物質を除去して、
ミネラルを含む安心な水をつくります。

●医療機器承認製品

アルカリクリンスイは医療機器として製造承認を受けています。
(AL680/AL690 医療機器承認番号: 21700BZ200116000)

ミネラル

- ① 遊離残留塩素
- ② 濁り(細菌・菌形体)
- ③ 総トリハロメタン
- ④ クロロホルム
- ⑤ ブロモジクロロメタン
- ⑥ ジブロモクロロメタン
- ⑦ プロモホルム
- ⑧ 溶解性鉛
- ⑨ 農薬(CAT)
- ⑩ カビ臭(2-MIB)
- ⑪ テトラクロロエチレン
- ⑫ トリクロロエチレン
- ⑬ 1,1,1-トリクロロエタン

※UZC2000/UNC1000ともに13物質除去が可能です。

〈第1フィルター〉不織布

〈第2フィルター〉イオン交換樹脂+活性炭

〈第3フィルター〉中空糸膜

クリンスイ独自の3重ろ過システムによる、高性能カートリッジを採用。

「家庭用品品質表示法」で除去対象の13物質を高度除去します。

第1フィルター


鉄サビ等の大きなゴミを除去。

第2フィルター

イオン交換で溶解性鉛を除去。さらに、活性炭の優れた吸着作用で、カルキ臭はもちろん、トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、農薬(CAT)等も吸着除去。

第3フィルター

クリンスイの心臓部ともいえるフィルター。ポリエチレン中空糸の膜面で、水道水に含まれる0.1マイクロメートル以上の粒子や細菌、赤サビ等を高度除去。

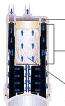
高性能浄水カートリッジ
UZC2000/UNC1000

- 第1フィルター
不織布
- 第2フィルター
イオン交換樹脂+活性炭
- 第3フィルター
中空糸膜(ポリエチレン)

※AL690にUZC2000が、AL990にUNC1000がセットされています。




活性炭

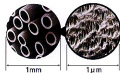

※1μm=1/1000mm

ビルトインだから実現した、使いやすさと美しさ。

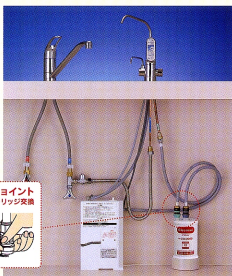ワンタッチジョイント
工具不要のカートリッジ交換

器具には、このリングを引上げてください。

1-2分OK

広々使えるシンクまわり。

場所をとるアルカリユニットとカートリッジは、シンクの下へビルトイン。キッチンらしいフォルムがそのまま活かれます。

連続使用が可能。

待ち時間なしでアルカリイオン水を使用できるため、節水効果が期待できます(約10分以内に飲用範囲内の同じ水質の水を使用する場合)。

みんなにやさしい安心設計。

強アルカリイオン水や酸性イオン水を誤飲しないための機能が充実。警告音や飲用モードへの自動切替など、小さなお子様やお年寄りの方にも安心してお使いいただけます。

レバーで簡単に流量調節。

流量はレバーで調節が可能。必要な分だけ水を出すことができます。

電気分解してアルカリイオン水に。

「アルカリユニット」電気分解

用途に合わせて、6種類の水が選べます。

pH10.5の強アルカリイオン水からpH5.5の酸性イオン水まで、6種類のモードボタンを押すだけで簡単操作。飲用や洗顔など必要に応じてお使いください。

強アルカリイオン水 (pH9.5~pH10.5)

Ⅲ アルカリイオン水 (pH9.0~pH10.0)

普段の飲用に。

Ⅱ アルカリイオン水 (pH8.5~pH9.5)

飲み慣れてきたら。

Ⅰ アルカリイオン水を飲み慣れてきたら、Ⅱ アルカリイオン水に。

Ⅰ アルカリイオン水 (pH8.0~pH9.0)

飲み始めに。

アルカリイオン水を初めて飲まれる方におすすめします。

浄水


酸性イオン水 (pH5.0~pH 6.5)

アストリンゼント効果があります。

アストリンゼント効果があるので、毎日の美容にお使いになれば、洗顔や手洗いにご使用いただけます。

強アルカリを含む4段階の切替機能をもつ高性能アルカリユニット。

電気分解の仕組み

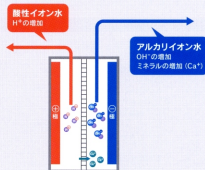

自動洗浄機能搭載

安定した電気分解を維持。

電極板に付着する水道水中のカルシウム等を、自動的に洗浄するので、電気分解の効率を落とすことなくアルカリイオン水を生成し続けます。

タッチパネルは「簡単」&「安心」。

通常の操作は、タッチパネルのボタンを押すだけで簡単に切り替えができます。また、各種ランプで常に使用状況をお知らせする、安心の使いやすさです。

モードランプ

アルカリイオン水・浄水は緑色に、強アルカリイオン水・酸性イオン水は赤色に点灯します。

カートリッジ交換ランプ

カートリッジの交換時期をお知らせします。緑色→橙色→赤色と段階的に変わり、交換のタイミングをわかりやすくしています。赤色になったら交換です。

強アルカリ適正流量ランプ

強アルカリイオン水の使用時に、適正な流量であることをランプでお知らせします。

飲用ボタン

ボタンを押すと、浄水→アルカリ→アルカリⅡ→アルカリⅢに切り替わり、用途に合わせた水が選べます。



毎日の生活に **他にもこんな使い方を提案します。**

強アルカリイオン水 ワンダーシंक型で初めて

ゴボウなどのアク抜きや、野菜をゆでる時に。
※飲用には適していません。

III アルカリイオン水

コーヒー、紅茶、お茶などの飲み物や薬物などに。



II アルカリイオン水

水の吸収力を高め、炊飯などに。

浄水

ミネラルはそのまま残した水。
薬の服用時やミルクの溶き水に。

酸性イオン水

洗顔のほか、茶洗落としなど食器洗いに。
※飲用には適していません。



セット品番

セット品番	AL680	AL690
セット内容	ビルトインアルカリ浄水器とUZC2000のセット	ビルトインアルカリ浄水器とUNC1000のセット

定価・仕様

販売名	ビルトインアルカリ浄水器	
定格	AC100V 50-60Hz 1.5A	
消費電力	約 150W(最大時) (待機時: 約 3W)	
使用可能配水管径	0.07 ~ 0.75MPa	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa	
使用水温	35℃未満	
材料	ABS 樹脂、POM 樹脂、白金、チタン	
寸法	幅 170mm× 奥行 104mm× 高さ 289mm	
質量	3.5kg(満水時約 4.0kg)	
電源コード	1.2m	
方式	連続電解方式	
電解能力切換	アルカリ: 4 段階 酸性: 1 段階	
連続使用可能時間	アルカリ/酸: 1日〜約 30分 / 強アルカリ/酸性水: 約 10分	
排水量	排水口水量: 約 2.0L/分 排水口水量: 約 0.50L/分 (圧 0.1MPa 20℃時)	
生成水量	排水口水量: 約 3.0L/分 排水口水量: 約 0.75L/分 (圧 0.2MPa 20℃時)	
電極洗浄	自動洗浄方式	
形態	元止め式流量調節機能付水栓	
材料	真鍮、ステンレス、EPDM	
取付穴径	直径 36mm ~ 40mm	
取付天板厚範囲	4mm ~ 30mm	
取付方式	上面給付方式	
操作パネルコード	1.5m	
質量	全重: 260mm 排水口高さ: 225mm 排水口高さ: 64mm 回転半径: 150mm	
寸法	1.5kg	
カートリッジの種類	UZC2000 UNC1000	
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換樹脂、活性炭、不織布	
ろ過速度	3L/分 3.5L/分	
ろ過残留係数	総ろ過水量 40,000L (除去率80%) 総ろ過水量 100,000L (除去率80%)	
濁り	総ろ過水量 20,000L (ろ過残留50%) 総ろ過水量 30,000L (ろ過残留50%)	
総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L (除去率80%) 総ろ過水量 16,000L (除去率80%)	
クロロホルム	総ろ過水量 8,000L (除去率80%) 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	
プロピロクロロメタン	総ろ過水量 10,000L (除去率80%) 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L (除去率80%) 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	
ブロモホルム	総ろ過水量 10,000L (除去率80%) 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	
溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L (除去率80%) 総ろ過水量 10,000L (除去率80%)	
CAT(酸素)	総ろ過水量 20,000L (除去率80%) 総ろ過水量 50,000L (除去率80%)	
2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 20,000L (除去率80%) 総ろ過水量 40,000L (除去率80%)	
テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L (除去率80%) 総ろ過水量 20,000L (除去率80%)	
トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L (除去率80%) 総ろ過水量 20,000L (除去率80%)	
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 10,000L (除去率80%) 総ろ過水量 20,000L (除去率80%)	
ろ材の交換時期の目安	12ヶ月(1日20L使用した場合) 総ろ過水量120,000Lは標準となります。	12ヶ月(1日20L使用した場合) 総ろ過水量120,000Lは標準となります。
質量	約 0.8kg (満水時 1.4kg)	約 1.9kg (満水時 3.0kg)
寸法	最大径 105mm× 高さ 217mm	最大径 137mm× 高さ 253mm
除去できない成分	水に溶けこんでいる塩分(海水)、重炭酸イオン類(溶解性鉛は除去可能)	
給水装置の構造及び材質の種類による表示	水道法基準適合性能表示 耐圧性能・漏出性能・水質浄化性能、逆流防止性能 認証登録番号 AL680/AL690: TC5004	
医療機器承認番号	AL680/AL690: 21700BZ200116000	

*仕様は予告なく変更することがあります。

梱包品目

- カートリッジ×1 ●カートリッジ受皿または取付台×1 ●アルカリ浄水器専用水栓×1
- アルカリ浄水器本体×1 ●フレキ管×1 ●ホース×2 ●止水栓・片ナットケース×1
- 調剤用ブロー×1 ●インクファスター×1 ●pH測定液・グリセリン酸カルシウム×1

別売品

- グリセリン酸カルシウム(ASK1000): 3,400円(税込み3,570円)
- pH測定試薬(ASP2000): 1,500円(税込み1,575円)
- 電解槽洗浄カートリッジ(ASH5000): 2,500円(税込み2,625円)

使用上の注意

- 水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。
- 温泉水・井戸水など質物が多く含む水には使用しなれません。
- カートリッジの交換時期の目安は、使用水量・水質・水圧などにより異なります。
- 35℃以上の温水を過ぎないでください。
- くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。
- 毎日の使用開始時は浄水をUZC2000の場合15秒以上、UNC1000の場合は30秒以上流してからお使いください。
- 内部を凍結させないようにしてください。
- カートリッジは、当社指定の水栓と組み合わせてご使用ください。
- 本品の常用使用圧力は0.07 ~ 0.35MPaです。
- 水にけいりんではる塩分(海水)、重炭酸イオンは除去できません(溶解性鉛は除去可能)。また、塩素を軟水に変えることはできません。
- 重炭酸などには、使用しないでください。
- ご使用の際には、必ず適用機種を取扱説明書をお読みください。

■アルカリイオン水・酸性イオン水の使用について

- アルカリイオン浄水器により生成したアルカリイオン水を使用するときは、次のことにご注意ください。(1) 医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。(2) 飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状が改善がみられない場合には、医師にご相談ください。
- 酸性イオン水を使用するときは次のことにご注意ください。肌の弱い方、アレルギー体質の方は、医師にご相談ください。
- 次のような方はご使用前に医師にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている方 (2) 持病のある方または体の弱っている方 (3) 妊娠に陣痛のある方
- 初めてご使用になる場合は「アルカリ」より少量ずつ(コップ1~2杯) 2週間程度アルカリイオン水に慣れていたが、その後 pH を上げてご使用されることをおすすめします。
- 下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。
- 水質(地下水等)によっては、十分な pH 値が得られない場合がありますので、本製品をお買い上げになる前に、販売店にご相談ください。

カートリッジ交換について

- 交換用カートリッジをお求めの場合には、販売店、施工業者、クインスイザービジネスセンターにお問い合わせください。
- 当カタログ記載の仕様・価格は変更する場合がございますのでご了承ください。
- 当カタログ記載の製品写真は、印刷のため実物の色とは多少異なります。